



## **CONTENEDORES TRANSPORTE** **SERIES SC-V y XC-V**




- Los contenedores de la serie SC-V y XC-V de boca estrecha se emplean para el transporte en fase vapor de muestras biológicas.
- Almacenamiento para transporte de tubos o pajuelas en cánisters.
- Capacidad de llenado de nitrógeno entre 1,5 a 6,8 litros.
- Están fabricados en aluminio y aislados al vacío.
- Incorporan un material absorbente que retiene el nitrógeno líquido, manteniendo en su interior una temperatura que puede alcanzar hasta -150°C.
- Opción de protector de cartón para evitar al máximo los posibles golpes producidos por el transporte.
- Certificado CE como Producto Sanitario según la directiva 93/42/EEC.

## CARACTERÍSTICAS



	SC 2/1 V	SC 4/2 V	XC 20/3 V
Capacidad LIN (lit.)	1,5	3,6	6,8
Pérdida estática (lit./día)	0,19	0,26	0,30
Nº cánisters	1	1	4
Nº tubos de 2 ml	9	106	840
Nº pajuelas 1/2 cc	88	440	3.750
Altura cánister	127	278	278
Diámetro cánister	31	67	80
Diámetro boca (mm)	35	70	96,7
Altura total (mm)	343	468	635
Diámetro externo (mm)	184	222	368
Peso vacío (kg)	2,7	5	10,5
Peso lleno (kg)	4	7,7	16

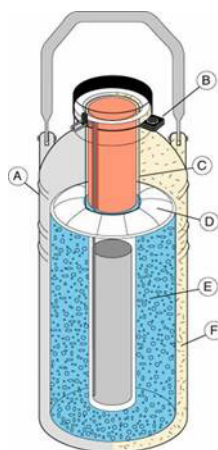

- A - Diseñado en aluminio ligero, disminuye coste de transporte
- B - Pestaña de cierre
- C - Cuello de alta resistencia, reduce pérdidas de LIN
- D - Sistema de cierre para retención del vacío
- E - Absorbente hidrofóbico - repele humedad y mantiene -150°C
- F - Sistema de aislamiento

## CÓDIGOS

3.327.75.200	SC 2/1 V	3.327.75.201	Protector transporte SC 2/1 V y SC 4/2 V
		3.327.75.221	Protector transporte XC 20/3 V
121021	SC 4/2 V	3.327.75.202	Tapón contenedor SC 2/1 V
		3.327.75.211	Tapón contenedor SC 4/2 V
3.327.75.220	XC 20/3 V	3.327.75.222	Tapón contenedor XC 20/3 V

CENTRAL: 08009 - Barcelona, Aragón 300, Tel: (93) 290 26 00, Fax: (93) 290 26 10

## SUCURSALES

**ALICANTE - 03113**  
Pol. Ind. de las Atalayas  
Parcela 157  
Tel.: (965) 11 24 60  
Fax: (965) 28 60 74

**TELDE - 35219**  
(Las Palmas G. C.)  
Urbanización Industrial  
Salinetas  
Tel.: (928) 13 02 90  
Fax: (928) 13 34 81

**SAN SEBASTIAN DE LOS REYES - 28703 (Madrid)**  
Avda Tenerife, 2 - Edif. 1  
Tel.: (91) 657 95 58  
Fax: (91) 657 95 68

**SEVILLA - 41013**  
Av. Ramón Carande, 10  
Tel.: (95) 423 95 51  
Fax: (95) 423 93 80

**ARRIGORRIAGA - 48480**  
(Vizcaya)  
Barrio del Chaco, s/n  
Tel.: (94) 671 92 06  
Fax: (94) 671 92 28

**EN PORTUGAL (GASIN)**

**OPORTO 4451-801**  
Leça da Palmeira  
Rua do Progresso 53  
Perafita - Apartado 3051  
Tel: 00 - 351 - 22 - 999 83 00  
Fax: 00 - 351 - 22 - 999 83 20

**BARCELONA - 08037**  
Córcega, 381, 4ª Planta  
Tel.: (93) 290 26 92  
Fax: (93) 290 26 93

**LA CORUÑA -15679**  
Curros Enríquez 41  
(N-VI) El Temple  
Tel.: (981) 63 40 41  
Fax: (981) 63 92 63

**MARRATXI - 07141**  
(Mallorca)  
Polig. Ind. Can Rubiol  
Cellelers, 142  
Tel.: (971) 22 64 72  
Fax: (971) 60 43 64

**LAGUNA DE DUERO - 47140**  
(Valladolid)  
Avda. de Madrid, 82  
Tel.: (983) 54 21 31  
Fax: (983) 54 21 33

**ZARAGOZA - 50015**  
Plataforma Logística  
de Zaragoza-Plaza  
C/. Pertusa, 12  
Parcela ALI 7.1  
Tel.: (976) 74 90 74  
Fax: (976) 74 90 75

**LISBOA - 2735-521 Cácem**  
Estrada Nacional, 249 - km. 1,8 - D  
San Marcos  
Tel: 00 - 351 - 21 - 427 00 00  
Fax: 00 - 351 - 21 - 426 46 56